



**UŽIVATELSKÝ MANUÁL – CZ**  
**IN 25933 Elektrický vozík inSPORTline Hawkie Evo s**  
**polohovatelným opěradlem**



# OBSAH

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY .....	3
POPIS PRODUKTU .....	5
MONTÁŽ.....	6
POUŽITÍ.....	9
OVLÁDÁNÍ.....	10
TABULKA INDIKÁTORŮ A PORUCH .....	11
DÁLKOVÝ OVLADAČ.....	12
SLOŽENÍ .....	14
BATERIE .....	16
NABÍJENÍ BATERIE .....	16
INFORMACE O BATERII.....	16
ÚDRŽBA A SKLADOVÁNÍ .....	16
SPECIFIKACE .....	17
OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ.....	17
ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE .....	17

SevenSport s.r.o., si vyhrazuje právo provést jakékoli změny a vylepšení svého produktu bez předchozího upozornění. Navštivte naši stránku [www.insportline.cz](http://www.insportline.cz), kde naleznete nejnovější verzi manuálu.

## BEZPEČNOSTNÍ POKYNY


- Před použitím si přečtěte manuál a uschovejte si jej pro budoucí potřebu.
- Produkt nepoužívejte, pokud se na něm objeví ostré hrany.
- V případě poruchy okamžitě ukončete provoz a kontaktujte servis. Vozík sami neopravujte.
- Před použitím se naučte přístroj používat, vyhledejte bezpečný a otevřený prostor a vyhledejte pomoc druhé osoby do doby, než budete přístroj bezpečně používat.
- Před nasednutím a vysednutím se ujistěte že je produkt vypnutý.
- Vždy mějte nastavenou a jezděte takovou rychlostí aby jste neohrožovali sebe nebo ostatní osoby a jejich majetek.
- Doporučujeme vždy začínat na nejnižším rychlostním stupni.
- Některé komunikační zařízení mohou operovat na stejné frekvenci jako dálkový ovladač vozíku. Pokud máte jakýkoliv takové zařízení u sebe (telefon aj.) vždy nejprve vyzkoušejte že nebude zasahovat do ovládání.
- Některé transmitery mohou narušit dálkové ovládaní vozíku.
- Pokud pozorujete jakýkoliv nežádoucí pohyb, nebo se vozík náhle zastaví, okamžitě jej vypněte.
- Nezasahujte, neopravujte a nemodifikujte produkt.
- Pokud nastane jakákoliv popsána situace okamžitě vypněte vozík: náhlý pohyb bez zadání uživatele, směr jízdy se nedá ovládat, selhání brzd.
- Vozík je určen pro přepravu jedné osoby.
- Nejezděte do příliš příkrých kopců.
- Nejezděte pod vlivem drog, léků a alkoholu.
- Za vozík nepřipevňujte další vozidla nebo předměty.
- Vozík nesmíte připojovat za další vozidla.
- Nepřekračujte maximální povolené stoupání.
- Nepohybujte náhle joystickem, pokud je vozík v pohybu.
- Nikdy nevozte na vozíku druhé osoby a nepřekračujte maximální povolenou nosnost vozíku.
- Pokud je vozík v běžném pohybu, nevypínejte jej, můžete poškodit motor nebo ovládání. Vozík vypínejte v pohybu POUZE pokud nad ním ztratíte kontrolu.
- Nejezděte po povrchu, který není zpevněný (písek, hluboká tráva, jemná hlína atd.)
- Nejezděte po schodech.
- Před čistěním a údržbou se ujistěte, že je vozík vypnutý.
- Vozík nezapínejte, pokud na něm nesedíte.
- Vozík není určen pro běžný silniční provoz. Jezděte pouze po komunikacích pro něj určených (chodník).
- Neměňte náhle směr jízdy (dopředu – dozadu). Směr jízdy měňte v moment, kdy se vozík zastaví.
- Z kopce vždy jezděte na nejnižší rychlost, joystick nechte ve střední poloze.
- Vždy mějte chodidla umístěna na opěrce nohou.

- Před jízdou se ujistěte, že je baterie plně nabitá.
- Vozík nabíjejte v dobře větrané místnosti.
- Před jízdou zkontrolujte utáhnutí a správné složení křesla.
- Před couváním se ujistěte, že za Vámi není žádná překážka. Couvejte na nejnižší rychlost.
- Vyhněte se sporadickým pohybům a náhlým změnám směru jízdy.
- Ruce a nohy mějte umístěny na opěrkách.
- Nejezděte přes překážky vyšší jak 5 mm.
- Nejezděte přes mezery delší jak 10 cm.
- Maximální stoupání je 12°.
- Pokud jedete v kopci, necouvejte.
- Nejezděte po povrchu, který je nakloněn více jak 3° do strany.
- Nejezděte na měkkém, nerovném nebo nezajištěném povrchu (tráva, štěrk).
- Před jízdou z kopce nastavte nejnižší rychlost, jízdou na kopci se prodlužuje brzdná dráha.
- Nejezděte skrz nerovnosti jako jsou patníky aj.
- Nejezděte ve vodě, po ledu nebo sněhu, nebo zhoršených viditelných podmínkách.
- Nenechávejte vozík vystavený přímému slunečnímu svitu a vlivu počasí.
- Chraňte před deštěm a vodou.
- Ovládací panel není voděodolný.
- Pravidelně kontrolujte stav pneumatik. Opotřeбенé okamžitě vyměňte.
- Nejezděte za deště nebo po mokré vozovce. Hrozí poškození elektroniky a baterie.
- Dálkový ovladač je napájen 2x AAA bateriemi
- Celková nosnost: 110 kg
- Dálkové ovládání až na 15 m (záleží na okolních podmínkách)
- Maximální rychlost až 6 km/h při optimálních podmínkách
- Maximální dojezd až 24 km při optimálních podmínkách
- Vozík je poháněn 2x 350W motory

## POPIS PRODUKTU




1	Joystick
2	Nabíjecí port joysticku
3	Bezpečnostní pás
4	Opěrky nohou
5	8" přední kola
6	Tlačítko pro složení opěrky rukou
7	12" zadní kola

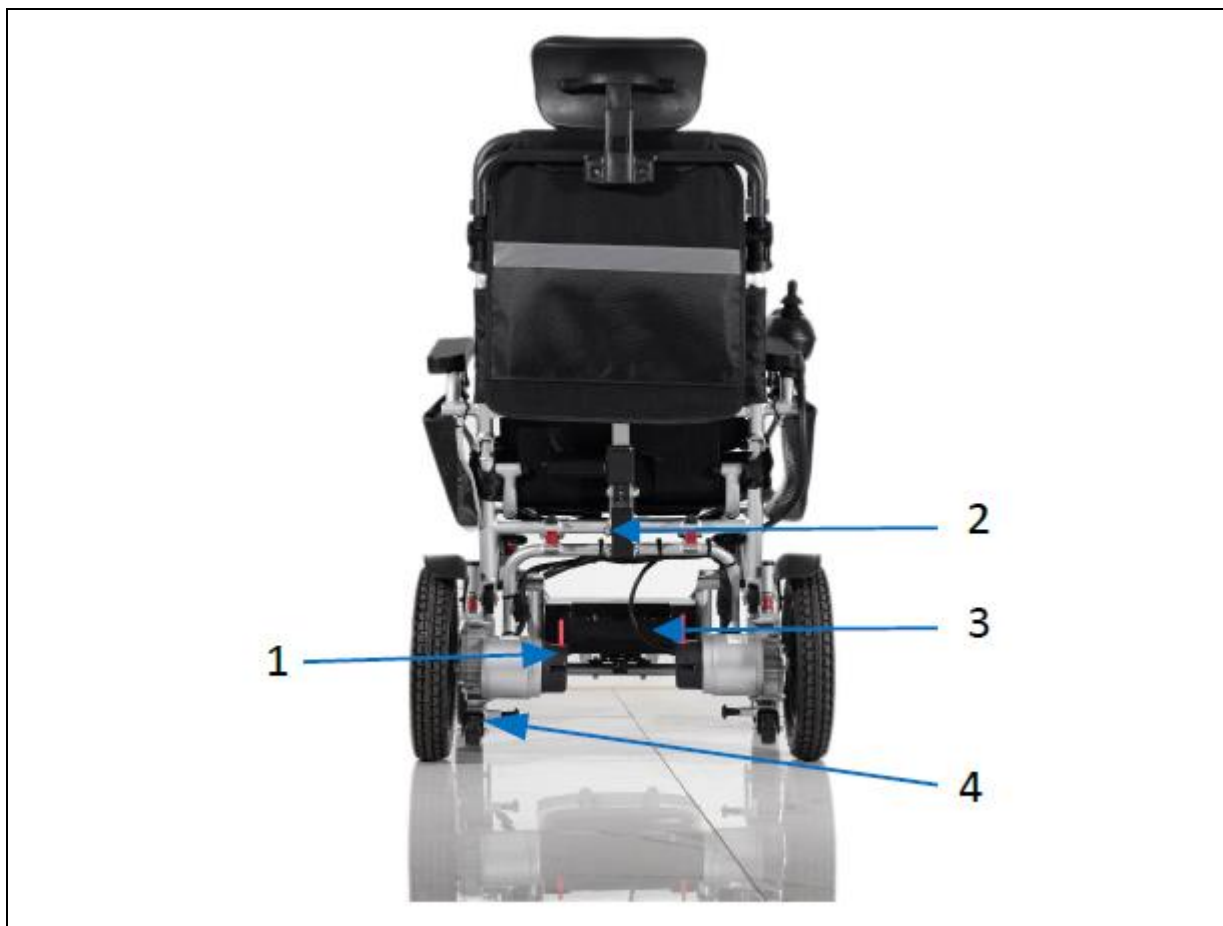

1	Přepnutí náhonu elektrický / manuální
2	Přezka pro složení
3	Adaptér baterie
4	Zámek nastavitelných koleček

## MONTÁŽ

### Opěrka hlavy

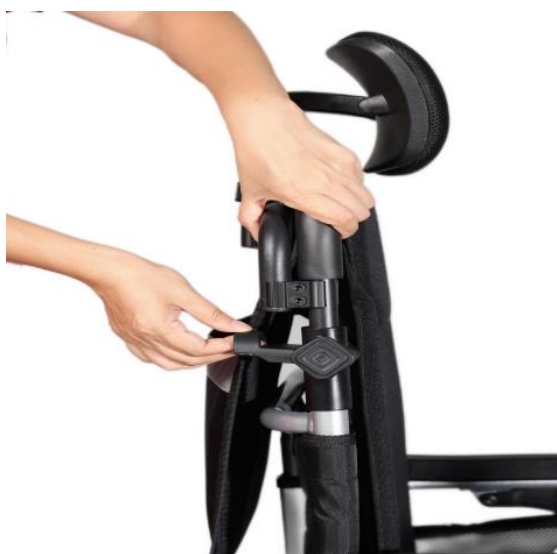

Povolte šrouby, nastavte pohodlnou polohu opěrky a poté šrouby opět utáhněte.



Ujistěte se, že je opěrka správně dotažena.



Uzamkněte opěrku v dané poloze.

Opěrka je polohovatelná nahoru a dolů.

### Montáž joysticku



1. Nastavení polohy opěrky

2. Tlačítko potvrzení

Upevněte joystick na pravou nebo levou opěrku.

Pokud chcete upravit náklon opěrky, stiskněte tlačítko pro změnu náklonu, dokud nezačne blikat prostřední dioda.



Poté stiskněte tlačítko pro potvrzení, uslyšíte 3x zvukové signály.



Pomocí joysticku poté můžete měnit náklon dopředu nebo dozadu. Po nastavení náklonu, stiskněte tlačítko pro potvrzení.




Dozadu



Potvrzení  
Dopředu

Připojte ovladač na pravou nebo levou opěrku k motoru a baterii.

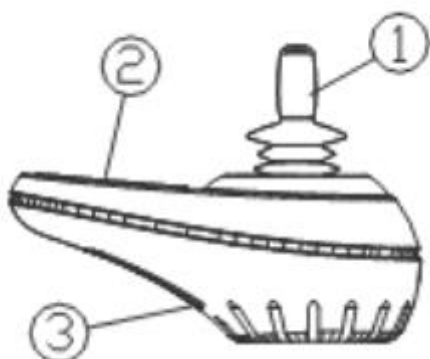

1. Joystick

2. Ovládací panel

3. Napájecí port

Joystick a ovládací panel chraňte proti nárazům a pádům.

Chraňte ovládací panel a joystick proti nadměrné vlhkosti a nečistotám.




Ovládací panel a joystick čistěte suchým hadříkem. Nepoužívejte rozpouštědla nebo jiné agresivní čisticí prostředky.

## POUŽITÍ

Před jízdou se nejprve seznámte s ovládáním. Jízdu si nejprve vyzkoušejte za asistence druhé osoby na bezpečném místě bez provozu.


Před nasednutím se vždy ujistěte, že je vozík vypnutý. Nastavte takovou maximální rychlost, která bude odpovídat vašim schopnostem. Doporučujeme nechat rychlost na nižších hodnotách, dokud se kompletně neseznámíte s ovládáním vozíku.

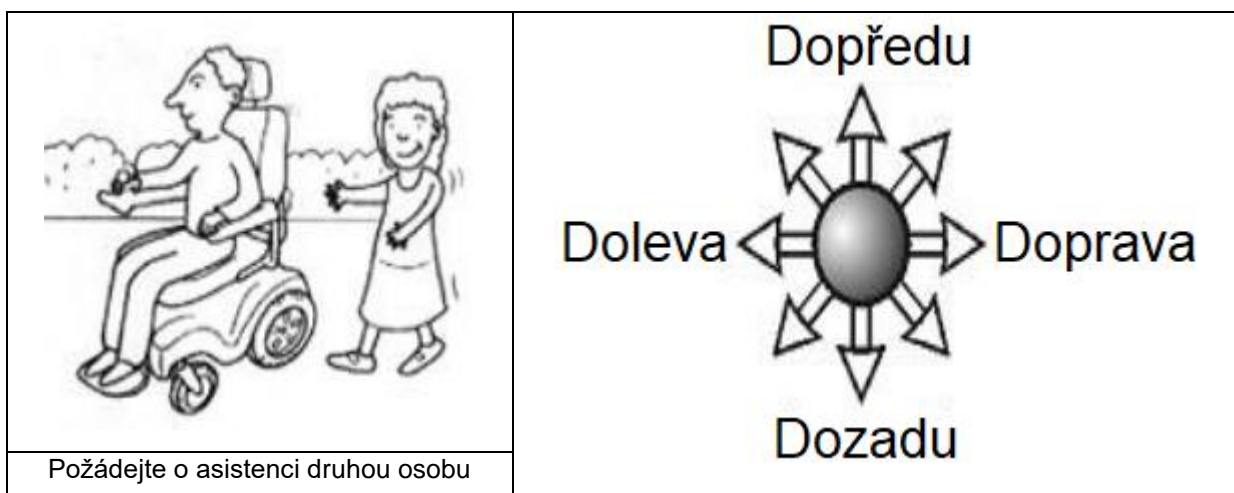

Trénink ovládání vždy provádějte na nejnižší rychlost. Vždy pohybujte joystickem v požadovaném směru jízdy.

Nejprve si vyzkoušejte pohyb dopředu. Poté si vyzkoušejte „esíčka“.

Pokud zvládnete jízdu dopředu a do stran, naučte se couvat. Během couvání dávejte pozor na rychlost a zda nejsou v cestě další osoby nebo překážky.

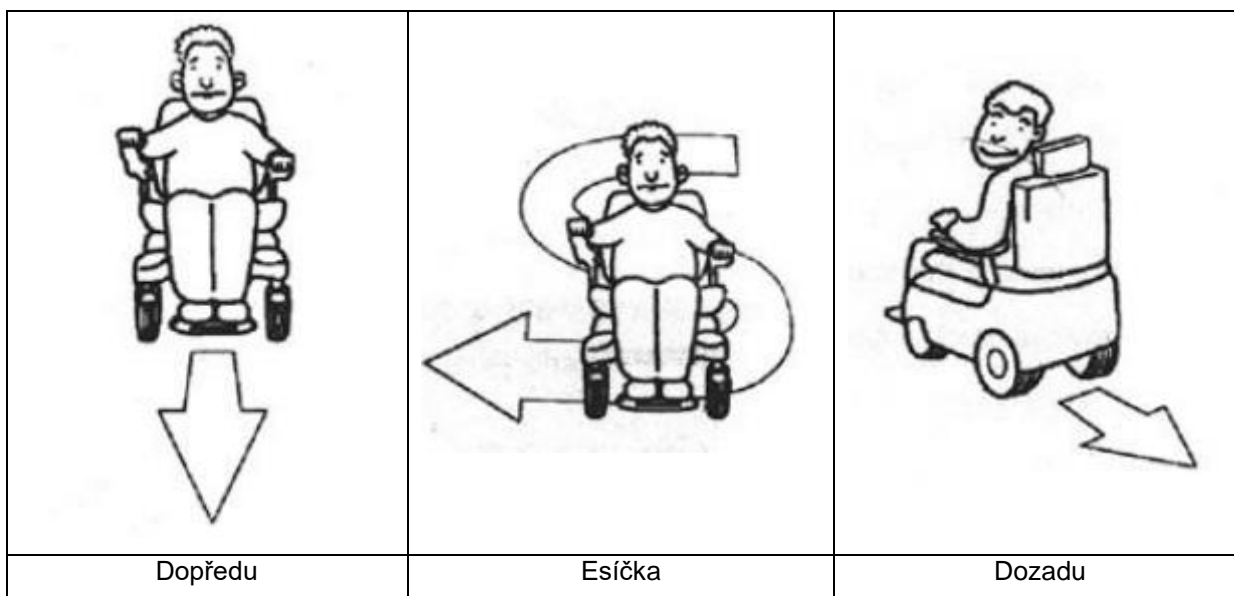

Jakmile pustíte joystick, pohyb vozíku se zastaví.


Pokud nastane jedna z následujících situací okamžitě vypněte vozík a vypojte baterii:

- Náhlý pohyb bez zadání signálu
- Směr jízdy není pod kontrolou
- Chyba brzd

Během jízdy dodržujte následující:

- Během couvání se ujistěte, že za vámi není žádná překážka. Vždy couvejte na nejnižší rychlost.
- Brzděte pomalu. Nedělejte nepravidelné a náhlé změn pohybu.
- Vždy mějte končetiny na opěrkách.
- Nikdy nenajíždějte na překážky, kterou jsou vyšší jak 5 mm.
- Nikdy nepřejíždějte mezery širší jak 10 cm.
- Nejezděte na v terénu, který má náklon vyšší jak 12°.
- Nikdy necouvejte v terénu, který je nakloněn.
- Nejezděte na šikmém povrchu, hrozí riziko překlopení.
- Nejezděte po nezpevněném terénu jako jsou tráva, štěrk nebo polní cesty.
- Během jízdy z kopce jedte pomalu a mějte rychlost pod kontrolou.
- Před vystoupením z vozíku se ujistěte, že jste na rovném povrchu a vozík je vypnutý.

## OVLÁDÁNÍ

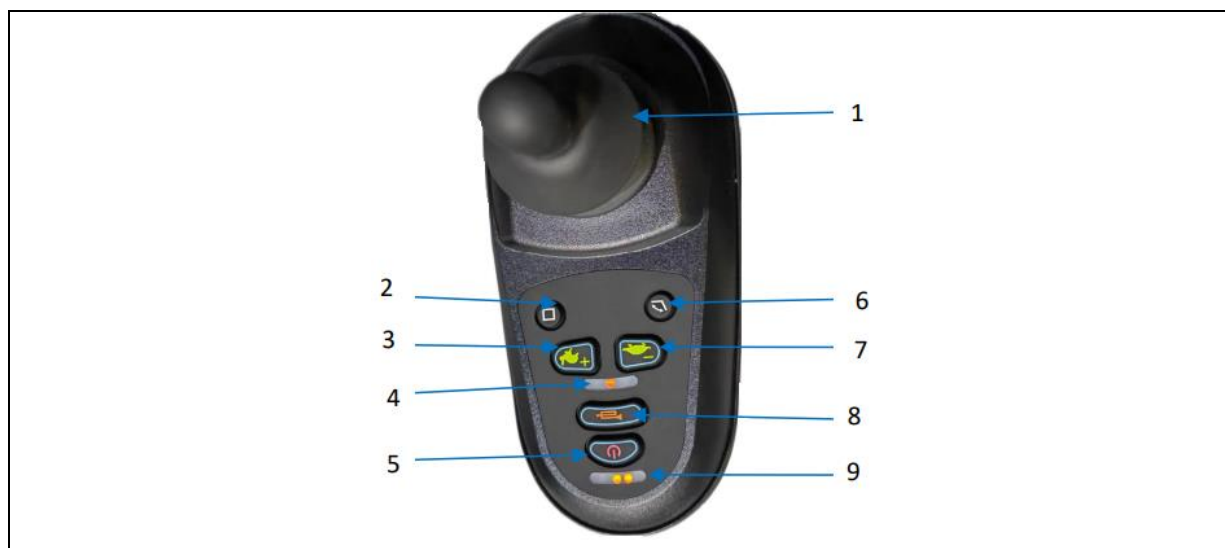

1.	Joystick	6.	Polohování opěrky
2.	Tlačítko potvrzení	7.	Zpomalení
3.	Zrychlení	8.	Klakson
4.	Indikátor rychlosti	9.	Indikátor baterie
5.	Tlačítko napájení		

### Napájení

Stiskem tlačítka zapnete nebo vypnete vozík. V případě nouze můžete tlačítko použít pro zastavení.

Na ovládacím panelu je zobrazený aktuální stav baterie.

Během zapnutí se rozsvítí všechny indikátory a zobrazí se aktuální stav baterie.

Během vypnutí zhasnou všechny indikátory.

### Joystick

Pomocí joysticku ovládáte rychlost a směr jízdy. Čím dále je joystick od středu, tím rychleji se vozík pohybuje. Pokud joystick pustíte, vrátí se do původní polohy ve středu a vozík se zastaví.

## Rychlost (S1 – S5)

Indikátory zobrazují maximální rychlost. Indikátory jsou rozděleny na 5 segmentů, čím vyšší číslo, tím je vyšší maximální rychlost.

### Klakson

Stiskem se spustí klakson.

### Snížení rychlosti

Stiskem tlačítka snížíte maximální možnou rychlost. Nastavení musí být vždy provedeno, když není vozík v pohybu.

### Zvýšení rychlosti

Stiskem tlačítka zvýšíte maximální možnou rychlost. Nastavení musí být vždy provedeno, když není vozík v pohybu.

## TABULKA INDIKÁTORŮ A PORUCH

Indikace	Porucha	Možné řešení
Všechny LED diody jsou zhasnuty a neozve se žádný zvukový signál	Vozík není napájen, zkontrolujte kabely a připojení	Zkontrolujte připojení napájení
Všechny LED diody jsou rozsvíceny	Vozík je napájen správně a může být používán	
Červená levá LED dioda je rozsvícena a ozve se zvukový signál	Slabá baterie	Dobijte baterii. Pokud musíte baterii dobíjet častěji než obvykle, nechte ji zkontrolovat, případně nahradit.
2x dlouhé zvukové signály po 2x krátkých	Porucha levého motoru	Zkontrolujte, zda je levý motor správně připojen k napájení
4x dlouhé zvukové signály po 2x krátkých	Porucha pravého motoru	Zkontrolujte, zda je pravý motor správně připojen k napájení
6x dlouhých zvukových signálů po 2x krátkých	Přepětí ovladače	Zkontrolujte přepětí. Vypněte a zapněte vozík.
7x dlouhých zvukových signálů po 2x krátkých	Porucha joysticku	
8x dlouhých zvukových signálů po 2x krátkých	Porucha ovladače	Vyměňte ovladač
9x dlouhých zvukových signálů po 2x krátkých	Porucha ovladače	Vyměňte ovladač

Změna náhonu – manuální / elektrický

Pomocí páček na obou motorech můžete přepnout náhon na manuální tlačení nebo pomocí dvou elektrických motorů.

Pro náhon pomocí motorů, musí být obě páčky směrem nahoru.

Pro manuální náhon, musí být obě páčky dolů.



## DÁLKOVÝ OVLADAČ

Dálkový ovladač je napájen 2x AAA bateriemi.

	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Joystick</li> <li>2. Tlačítko napájení</li> <li>3. Snížení rychlosti</li> <li>4. Opěrka zad</li> <li>5. Pro tento model, tlačítko nemá funkci</li> <li>6. Pro tento model, tlačítko nemá funkci</li> <li>7. Zrychlení</li> <li>8. Klakson</li> <li>9. Pro tento model, tlačítko nemá funkci</li> </ol>
--	--

Spárování dálkového ovladače

Zapněte ovladač na vozíku.



Stiskněte tlačítko napájení na dálkovém ovladači po dobu 5 vteřin.



Stiskněte tlačítko pro zpomalení na ovladači vozíku dokud se nerozsvítí dioda uprostřed.



Stiskněte tlačítko klaksonu na ovladači vozíku.



Stiskněte tlačítko pro snížení rychlosti na dálkovém ovladači dokud tlačítko napájení nepřestane blikat.



LED dioda na ovladači vozíku se vypne a ovladače jsou spárovány.



Pro změnu náklonu opěradla stiskněte tlačítko B a poté pomocí šipek upravte náklon.



Pomocí joysticku pak můžete ovládat vozík.



## SLOŽENÍ



Stiskněte přezku za opěrkou.



Uchopte opěradlo a zatlačte dopředu.



Složte vozík.



Pomocí šroubu pod madlem můžete upravit vzdálenost ovladače.

Pro složení madel je nutné povolit matici a madla zaklopit dozadu.

Vyjmutí baterie



Vytáhněte napájecí kabel



Uchopte baterii a vytáhněte z rámu.

## BATERIE

Vozík používá 24 V 12 Ah lithiovou baterii. Baterii měňte pouze v autorizovaném servise.

**Záruka 6 měsíců na životnost baterie – jmenovitá kapacita baterie neklesne pod 70 % své celkové kapacity v průběhu 6 měsíců od prodeje produktu.**

Pro správnou funkčnost a bezpečné použití baterie se řiďte instrukcemi v manuálu. Pokud je baterie poškozená, uniká z ní kapalina nebo abnormální zápach přestaňte baterii ihned používat.

- Životnost baterie je limitována. Pokud používáte baterii, která přesahuje běžnou životnost, tak se může zvýšit frekvence nabíjení a snížit dojezd.
- Baterii neotvírejte ani nevhazujte do ohně. Do baterie nevkládejte cizí předměty.
- Nedotýkejte se baterie kovovými předměty. Baterie může explodovat nebo být poškozená.
- Používejte pouze originální nabíječku.
- Během jízdy dodržujte místní nařízení a zákony.
- Baterii můžete průběžně dobíjet.
- Ideální teplota pro nabíjení baterie je +10 °C až +30 °C.
- Pokud používáte baterii v chladném prostředí, její dojezd je nižší.
- Baterii sami neopravujte ani neupravujte.

## NABÍJENÍ BATERIE

Baterie je nabíjena AC 110 – 240V 50 – 60 Hz, výstup 24V, 2Ah nabíječkou.

Před prvním použitím nabijte baterii. Poté baterii vybijte používáním, nejezděte rychle a příliš se nevzdalujte od místa bydliště, dokud nebudete vozík umět ovládat. Poté znovu nabijte baterii po dobu 8 – 14 hodin. Po 4 – 5 nabíjecích cyklech je kapacita baterie využívána na 100 %.

## INFORMACE O BATERII

Baterii dobíjejte co nejčastěji po použití. Baterie se postupně vybíjí i pokud není používána. Pokud vozík nepoužíváte pravidelně baterii dobíjejte jednou za týden. Používejte pouze originální nabíječku.

## ÚDRŽBA A SKLADOVÁNÍ

- Pro čištění používejte jemné čisticí prostředky a vlhký hadřík. Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky.
- Vždy všechny části řádně osušte, obzvláště elektronické části.



- Ovladač a panel držte mimo dosah vlhkosti.
- Kontrolujte stav kabelů a připojení.
- Pro čištění nepoužívejte proud vody ani vysokotlaké čističe.
- Vozík skladujte na dobře větraném místě bez korozivních plynů a vlhkostí vzduchu menší jak 80 %.

## SPECIFIKACE

Model	W5521 s polohováním
Rozměr (složený)	1100x630x1180 mm
Hmotnost s baterií	36 kg
Přední kola	200x50 mm
Zadní kola	320x60 mm
Nosnost	130 kg
Rychlost dopředu	0 – 6 km/h
Dojezd na jedno nabití	Cca. 24 km
Motor	2x 24V/350W
Otáčecí rádius	600 mm
Baterie (lithiová)	24V/12Ah
Brzdy	Elektromagnetické
Kolečka proti překlopení	50x25 mm
Náklon	Max. 25°
Nabíječka	AC100-240V 50/60 Hz Výstup: 24V 2A

## OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Po uplynutí životnosti produktu nebo v případě, že by další oprava již byla ekonomicky nevýhodná, se výrobku zbavte v souladu s místními předpisy a šetrně k životnímu prostředí. Výrobek odneste na nejbližší sběrné místo k tomu určené.

Předpisovou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomůžete prevenci negativních dopadů na životní prostředí, případně na lidské zdraví. Pokud si nejste jisti, konzultujte věc s místně příslušnými odpovědnými orgány, aby nedošlo k porušení předpisů a následné sankci.

Baterie nevhazujte mezi běžný odpad, ale odevzdejte je na místa určená pro recyklaci.

## ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE

### Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

Tyto záruční podmínky a reklamační řád upravují podmínky a rozsah záruky poskytované prodávajícím na zboží dodávané kupujícím, jakož i postup při vyřizování reklamačních nároků uplatněných kupujícím na dodané zboží. Záruční podmínky a reklamační řád se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a to i ve věcech těmito záručními podmínkami a reklamačním řádem nezmiňovaných.

Prodávajícím je společnost SEVEN SPORT s.r.o. se sídlem Strakonická 1151/2c, Praha 150 00, IČ: 26847264, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Praze oddíl C, vložka 116888.

Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.

„Kupující spotřebitel“ nebo jen „spotřebitel“ je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

„Kupující, který není „spotřebitel“, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí rámcovou kupní smlouvou a obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají.

Tyto záruční podmínky a reklamační řád jsou nedílnou součástí každé kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím. Záruční podmínky a reklamační řád jsou platné a závazné, pokud v kupní smlouvě či v dodatku v této smlouvě či jiné písemné dohodě nebude stranami dohodnuto jinak.

### **Záruční podmínky**

#### **Záruční doba**

Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost zboží v délce 24 měsíců, pokud ze záručního listu, faktury ke zboží, dodacího listu, příp. jiného dokladu ke zboží nevyplývá odlišná délka záruční doby poskytovaná prodávajícím. Zákonná délka záruky poskytovaná spotřebiteli není tímto dotčena.

Zárukou za jakost přejímá prodávající závazek, že dodané zboží bude po určitou dobu způsobilé pro použití k obvyklému, příp. smluvenému účelu a že si zachová obvyklé, příp. smluvené vlastnosti.

#### **Baterie**

Záruka 6 měsíců na životnost baterie – jmenovitá kapacita baterie neklesne pod 70% své celkové kapacity v průběhu 6 měsíců od prodeje produktu.

#### **Záruční podmínky se nevztahují na závady vzniklé (pokud lze aplikovat na zakoupený produkt):**

- zaviněním uživatele tj. poškození výrobku neodbornou repasí, nesprávnou montáží, nedostatečným zasunutím sedlové tyče do rámu, nedostatečným utáhnutím pedálů v klikách a klik ke středové ose
- nesprávnou údržbou
- mechanickým poškozením
- opotřebením dílů při běžném používání (např. gumové a plastové části, pohyblivé mechanismy, kloubové spoje, opotřebením brzdových destiček/špalků, řetězu, pláštěů, kazety/vícekolčka atd.)
- neodvratnou událostí, živelnou pohromou
- neodbornými zásahy
- nesprávným zacházením, či nevhodným umístěním, vlivem nízké nebo vysoké teploty, působením vody, neúměrným tlakem a nárazy, úmyslně pozměněným designem, tvarem nebo rozměry

### **Reklamační řád**

#### **Postup při reklamaci vady zboží**

Kupující je povinen zboží, dodané prodávajícím prohlédnout co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží, resp. po jeho dodání. Prohlídku musí kupující provést tak, aby zjistil všechny vady, které je možné při přiměřené odborné prohlídce zjistit.

Při reklamaci zboží je kupující povinen na žádost prodávajícího prokázat nákup a oprávněnost reklamace fakturou nebo dodacím listem s uvedeným výrobním (sériovým) číslem, případně týmiž doklady bez sériového čísla. Neprokáže-li kupující oprávněnost reklamace těmito doklady, má prodávající právo reklamaci odmítnout.

Pokud kupující oznámí závadu, na kterou se nevztahuje záruka (např. nebyly splněny podmínky záruky, závada byla nahlášena omylem apod.), je prodávající oprávněn požadovat plnou úhradu nákladů, které vznikly v souvislosti s odstraňováním závady takto oznámené kupujícím. Kalkulace servisního zásahu bude v tomto případě vycházet z platného ceníku pracovních výkonů a nákladů na dopravu.

Pokud prodávající zjistí (testováním), že reklamovaný výrobek není vadný, považuje se reklamační za neoprávněnou. Proávající si vyhrazuje právo požadovat úhradu nákladu, které vznikly v souvislosti s neoprávněnou reklamací.

V případě, že kupující reklamuje vady zboží, na které se vztahuje záruka podle platných záručních podmínek prodávajícího, provede prodávající odstranění vady formou opravy, případně výměny vadného dílu nebo zařízení za bezvadné. Proávající je se souhlasem kupujícího oprávněn dodat výměnou za vadné zboží jiné zboží plně funkčně kompatibilní, ale minimálně stejných nebo lepších technických parametrů. Volba ohledně způsobu vyřízení reklamační dle tohoto odstavce náleží prodávajícímu.

Proávající vyřídí reklamaci nejpozději do 30 dnů od doručení vadného zboží, pokud nebude dohodnuta lhůta delší. Za den vyřízení se považuje den, kdy bylo opravené nebo vyměněné zboží předáno kupujícímu. Není-li prodávající s ohledem na charakter vady schopen vyříditi reklamaci v uvedené lhůtě, dohodne s kupujícím náhradní řešení. Pokud k takové dohodě nedojde, je prodávající povinen poskytnout kupujícímu finanční náhradu formou dobropisu.

#### **CZ SEVEN SPORT s.r.o.**

Sídlo: Strakonická 1151/2c, Praha 5, 150 00, ČR  
Centrála: Dělnická 957, Vítkov, 749 01  
Reklamační a servis: Čermenská 486, Vítkov 749 01

IČO: 26847264  
DIČ: CZ26847264

Tel: +420 556 300 970  
Mail: [eshop@insportline.cz](mailto:eshop@insportline.cz)  
[reklamace@insportline.cz](mailto:reklamace@insportline.cz)  
[servis@insportline.cz](mailto:servis@insportline.cz)

Web: [www.inSPORTline.cz](http://www.inSPORTline.cz)

#### **SK inSPORTline s.r.o.**

Centrála, reklamační, servis: Električná 6471, Trenčín 911 01, SK

IČO: 36311723  
DIČ: SK2020177082

Tel.: +421(0)326 526 701  
Mail: [objednavky@insportline.sk](mailto:objednavky@insportline.sk)  
[reklamacie@insportline.sk](mailto:reklamacie@insportline.sk)  
[servis@insportline.sk](mailto:servis@insportline.sk)

Web: [www.inSPORTline.sk](http://www.inSPORTline.sk)

Datum prodeje:

Razítko a podpis prodejce:

#### **Reklamační zboží**



#### **Vrácení a výměna zboží do 30 dnů**



---

## ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

---

**Dovozce:**

Seven sport s.r.o.,  
Strakonická 1151 / 2C  
Praha 5-Hlubočepy 150 00  
IČ: 268 47 264  
Czech republic

**prohlašuje na vlastní zodpovědnost, že**

**výrobek: IN 25933 Elektrický vozík inSPORTline Hawkie Evo s  
polohovatelným opěradlem (W5521)**

**je ve shodě**

s technickými požadavky na výrobek stanovenými nařízením vlády

**Výrobek splňuje (EU)2017/745 a následující normy:**

EN ISO 14971:2019	EN ISO 15233-1:2016
EN 1041: 2008+A1:2013	ISO 10993-10:2013
EN ISO:10993-5:2009	EN ISO 10993-10:2013
EN 60601-1:2016	EN12184:2014
ISO7176	

MSDS / TCT221212M105 / 1.1.2023 (UN3480, UN3481, UN3171)


**Výrobce:**

**Zhejiang Innuovo Rehabilitation  
Devices Co.**

**No.196 Industy Road, Hengdian  
Movie Zone, Dongyang, Zhjiang,  
China**

Vítkov 24.2.2023



Seven Sport s.r.o.  
Bořivojova 35/373, 130 00 Praha 3  
IČO: 26847264 DIČ: CZ26847264  
tel./fax: +420 530 300 970 

SEVEN SPORT s.r.o.  
Roman Košťál, jednatel společnosti