



## UŽIVATELSKÝ MANUÁL – CZ

**IN 24986 Obličejový LED panel inSPORTline Coladome 600**



# OBSAH

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY .....	3
POPIS PRODUKTU .....	4
MONTÁŽ.....	4
PŘED PRVNÍM POUŽITÍM .....	4
POUŽITÍ.....	4
Světla .....	4
Čas.....	5
Teplota .....	5
Barva světél .....	5
ÚDRŽBA.....	5
SVĚTELNÁ TERAPIE .....	6
SPECIFIKACE PRODUKTU.....	6
OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ.....	6
ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE .....	6

## BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Před použitím si přečtěte manuál a uschovejte si jej pro budoucí použití.
- Manuál nechte k nahlédnutí i dalším uživatelům produktu.
- Informujte další uživatele o základních bezpečnostních pokynech a použití.
- Přístroj smí používat pouze zkušená a dospělá osoba se znalostmi o přístroji.
- Před použitím se ujistěte, že LED světla a přístroj nejsou poškozeny.
- Přístroj nepoužívejte a neskladujte na místech s vysokou vlhkostí (koupelny, sauny, bazény aj.).
- Používejte pouze v dobře ventilované místnosti.
- Přístroj musí být umístěn na rovný, pevný a stabilní povrch.
- Přístroj nevystavujte nárazům nebo pádům.
- Během provozu nepoužívejte další přístroje vyzařující teplo.
- Držte mimo dosah vody.
- Nezapojujte do poškozené zásuvky.
- Nepoužívejte, pokud je poškozený kabel nebo zástrčka.
- Po použití přístroj vypněte a vytáhněte ze zásuvky. Přístroj vytáhněte ze zásuvky i v za účelem údržby a čištění.
- Pokud se do přístroje dostane voda, okamžitě jej vypojte z el. proudu.
- Pokud přístroj vydává abnormální zvuky, nebo cítíte zápach, okamžitě ukončete provoz a přístroj vytáhněte z el. proudu.
- Přístroj neupravujte ani neopravujte sami.
- Přístroj používejte pouze tak, jak je popsáno v manuálu. Jakékoliv jiné použití není povoleno.
- Přístroj nepokládejte poblíž zdrojů tepla nebo otevřeného ohně.
- Během provozu nezakrývejte látkou nebo dalšími předměty.
- Přístroj očistěte pouze suchým hadříkem.
- Nepoužívejte, pokud trpíte onemocněním pokožky, srdeční poruchou, vysokým krevním tlakem, podrážděním nebo citlivou pokožkou.
- Vždy mějte nasazené ochranné brýle!
- Doporučená provozní teplota: 0 – 26°C
- Doporučená skladovací teplota 0 – 35°C
- Relativní vlhkost: <80%
- Četnost použití: lze používat 25 - 30 minut denně po dobu jednoho měsíce nebo po jakémkoli kosmetickém zákroku. V rámci léčby akné doporučujeme použití 3x týdně, alespoň 25 minut.

## POPIS PRODUKTU



1. Hlavní rám

2. Ovládací panel

3. Chladicí otvory

4. Vyhřívací panely

5. LED světla

6. Adaptér

7. Ochranné brýle

Při pravidelném užívání působí dezinfekčně a odstraňuje nechtěné bakterie v pokožce.

## MONTÁŽ




Připojte boční panely k hornímu panelu (s ovládáním).

## PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

Před použitím se ujistěte, že je kolem přístroje dostatek volného prostoru a že se nachází v dostatečné blízkosti zásuvky. Vyhněte se místům s vysokou vlhkostí nebo přímému slunečnímu záření.


Přístroj umístěte na rovný, pevný a stabilní povrch a zapojte do elektrického proudu.

## POUŽITÍ


Po zapojení podržte tlačítko vypínače .

Poté můžete nastavit jednotlivé funkce.


### Světla

Pomocí tlačítka MODE  vyberte funkci LIGHT (světla), indikátor začne blikat a pomocí tlačítek + a – můžete nastavit intenzitu světla (25%, 50%, 75%, 100%)

## Čas

Pomocí tlačítka MODE  vyberte funkci TIME (čas), indikátor začne blikat a pomocí tlačítek + a – můžete nastavit dobu provozu (minimální doba provozu je 25 min, každý další fragment prodlouží dobu provozu o 5 min až na maximum 60 min.)

## Teplota

Pomocí tlačítka MODE  vyberte funkci TEMP (teplota), indikátor začne blikat a pomocí tlačítek + a – můžete nastavit teplotu (minimální teplota je 40 °C, maximální teplota 75°C, jedná se o teplotu výhřevného tělesa, nikoliv teplotu vyhřátí okolního prostředí)


## Barva světél

Na výběr je 8 druhů záření: červené, zelené, modré, žluté, fialové, oranžové, světle zelené a cyklus barev.

Barvu změňte stiskem tlačítka vypínače.

Po uběhnutí nastaveného časového limitu se přístroj vypne.

Po použití vypněte přístroj a vypojte z el. proudu.

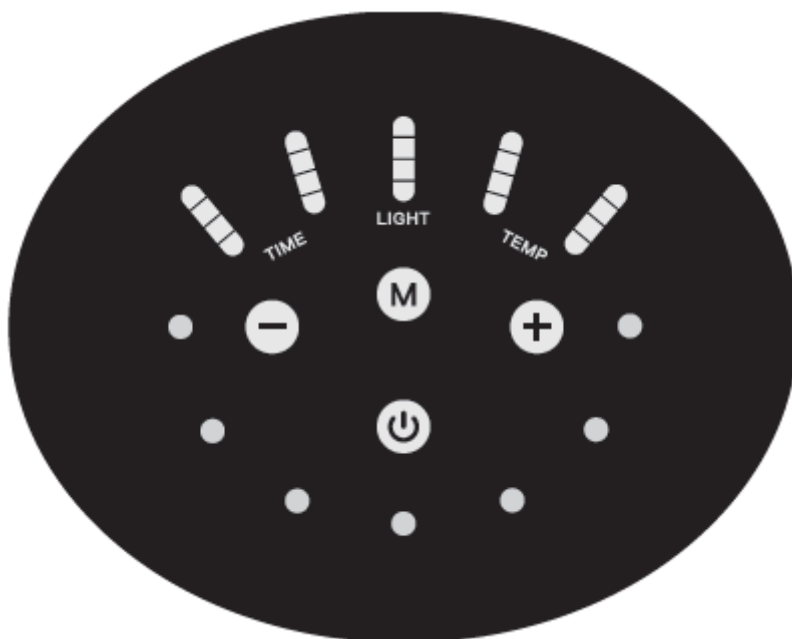

## ÚDRŽBA

- Rám přístroje otřete suchým a jemným hadříkem.
- Přístroj skladujte na suchém, stinném místě.
- Pro skladování přístroj rozložte.

**VAROVÁNÍ:** Před údržbou a skladováním se ujistěte, že je přístroj vypojen z el. proudu.

V případě poruchy nebo poškození kontaktujte servisní / reklamační oddělení.

## SVĚTELNÁ TERAPIE

### Červená

Stimuluje produkci kolagenu. Vhodné pro opravu tkání a nahrazení starých tkání pokožky. Vhodné pro zmenšení pórů.

### Zelená

Pomáhá srovnat barvu pigmentu a urychlit regeneraci pokožky.

### Modrá

Vhodné pro zničení bakterií a zklidnění pokožky.

### Žluté/Oranžové

Dodává pokožce energii, redukuje vrásky, srovnává barvu pigmentu, zlepšuje jemnost pokožky aj.

### Fialová

Vhodné proti akné.

### Světle modrá

Podporuje energii buněk a metabolismus.

### Bílá

Zlepšuje pevnost pokožky a zrychluje metabolismus tkání.

## SPECIFIKACE PRODUKTU

Vyrobeno	Čína
Napájení	DC 12V, 4A, 50 Hz/60Hz
LED	Červená, modrá, zelená
Rozměry	495 x 215 x 295 mm
Hmotnost	2,5 kg ± 10%

## OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Po uplynutí životnosti produktu nebo v případě, že by další oprava již byla ekonomicky nevýhodná, se výrobku zbavte v souladu s místními předpisy a šetrně k životnímu prostředí. Výrobek odnesete na nejbližší sběrné místo k tomu určené.

Předpisovou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomůžete prevenci negativních dopadů na životní prostředí, případně na lidské zdraví. Pokud si nejste jisti, konzultujte věc s místně příslušnými odpovědnými orgány, aby nedošlo k porušení předpisů a následné sankci.

Baterie nevhazujte mezi běžný odpad, ale odevzdejte je na místa určená pro recyklaci.

## ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE

### Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

Tyto záruční podmínky a reklamační řád upravují podmínky a rozsah záruky poskytované prodávajícím na zboží dodávané kupujícím, jakož i postup při vyřizování reklamačních nároků uplatněných kupujícím na dodané zboží. Záruční podmínky a reklamační řád se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a to i ve věcech těmito záručními podmínkami a reklamačním řádem nezmiňovaných.

Prodávajícím je společnost SEVEN SPORT s.r.o. se sídlem Strakonická 1151/2c, Praha 150 00, IČ: 26847264, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Praze oddíl C, vložka 116888.

Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.

„Kupující spotřebitel“ nebo jen „spotřebitel“ je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

„Kupující, který není „spotřebitel“, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí rámcovou kupní smlouvou a obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají.

Tyto záruční podmínky a reklamační řád jsou nedílnou součástí každé kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím. Záruční podmínky a reklamační řád jsou platné a závazné, pokud v kupní smlouvě či v dodatku v této smlouvě či jiné písemné dohodě nebude stranami dohodnuto jinak.

### **Záruční podmínky**

#### **Záruční doba**

Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost zboží v délce 24 měsíců, pokud ze záručního listu, faktury ke zboží, dodacího listu, příp. jiného dokladu ke zboží nevyplývá odlišná délka záruční doby poskytovaná prodávajícím. Zákonná délka záruky poskytovaná spotřebiteli není tímto dotčena.

Zárukou za jakost přejímá prodávající závazek, že dodané zboží bude po určitou dobu způsobilé pro použití k obvyklému, příp. smluvenému účelu a že si zachová obvyklé, příp. smluvené vlastnosti.

#### **Baterie**

Záruka 6 měsíců na životnost baterie – jmenovitá kapacita baterie neklesne pod 70% své celkové kapacity v průběhu 6 měsíců od prodeje produktu.

#### **Záruční podmínky se nevztahují na závady vzniklé (pokud lze aplikovat na zakoupený produkt):**

- zaviněním uživatele tj. poškození výrobku neodbornou repasí, nesprávnou montáží, nedostatečným zasunutím sedlové tyče do rámu, nedostatečným utáhnutím pedálů v klikách a klik ke středové ose
- nesprávnou údržbou
- mechanickým poškozením
- opotřebením dílů při běžném používání (např. gumové a plastové části, pohyblivé mechanismy, kloubové spoje, opotřebením brzdových destiček/špalků, řetězu, plášťů, kazety/vícekolečka atd.)
- neodvratnou událostí, živelnou pohromou
- neodbornými zásahy
- nesprávným zacházením, či nevhodným umístěním, vlivem nízké nebo vysoké teploty, působením vody, neúměrným tlakem a nárazy, úmyslně pozměněným designem, tvarem nebo rozměry

### **Reklamační řád**

#### **Postup při reklamaci vady zboží**

Kupující je povinen zboží, dodané prodávajícím prohlédnout co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží, resp. po jeho dodání. Prohlídku musí kupující provést tak, aby zjistil všechny vady, které je možné při přiměřené odborné prohlídce zjistit.

Při reklamaci zboží je kupující povinen na žádost prodávajícího prokázat nákup a oprávněnost reklamace fakturou nebo dodacím listem s uvedeným výrobním (sériovým) číslem, případně týmiž doklady bez sériového čísla. Neprokáže-li kupující oprávněnost reklamace těmito doklady, má prodávající právo reklamaci odmítnout.

Pokud kupující oznámí závadu, na kterou se nevztahuje záruka (např. nebyly splněny podmínky záruky, závada byla nahlášena omylem apod.), je prodávající oprávněn požadovat plnou úhradu nákladů, které vznikly v souvislosti s odstraňováním závady takto oznámené kupujícím. Kalkulace servisního zásahu bude v tomto případě vycházet z platného ceníku pracovních výkonů a nákladů na dopravu.

Pokud prodávající zjistí (testováním), že reklamovaný výrobek není vadný, považuje se reklamáce za neoprávněnou. Proávající si vyhrazuje právo požadovat úhradu nákladu, které vznikly v souvislosti s neoprávněnou reklamací.

V případě, že kupující reklamuje vady zboží, na které se vztahuje záruka podle platných záručních podmínek prodávajícího, provede prodávající odstranění vady formou opravy, případně výměny vadného dílu nebo zařízení za bezvadné. Proávající je se souhlasem kupujícího oprávněn dodat výměnou za vadné zboží jiné zboží plně funkčně kompatibilní, ale minimálně stejných nebo lepších technických parametrů. Volba ohledně způsobu vyřízení reklamáce dle tohoto odstavce náleží prodávajícímu.

Proávající vyřídí reklamaci nejpozději do 30 dnů od doručení vadného zboží, pokud nebude dohodnuta lhůta delší. Za den vyřízení se považuje den, kdy bylo opravené nebo vyměněné zboží předáno kupujícímu. Není-li prodávající s ohledem na charakter vady schopen vyřídít reklamaci v uvedené lhůtě, dohodne s kupujícím náhradní řešení. Pokud k takové dohodě nedojde, je prodávající povinen poskytnout kupujícímu finanční náhradu formou dobropisu.

**CZ**  
**SEVEN SPORT s.r.o.**

Sídlo: Strakonická 1151/2c, Praha 5, 150 00, ČR  
Centrála: Dělnická 957, Vítkov, 749 01  
Reklamáce a servis: Čermenská 486, Vítkov 749 01

IČO: 26847264  
DIČ: CZ26847264

Tel: +420 556 300 970  
Mail: eshop@insportline.cz  
reklamace@insportline.cz  
servis@insportline.cz

Web: www.inSPORTline.cz

**SK**  
**inSPORTline s.r.o.**

Centrála, reklamácie, servis: Električná 6471, Trenčín 911 01, SK

IČO: 36311723  
DIČ: SK2020177082

Tel.: +421(0)326 526 701  
Mail: objednavky@insportline.sk  
reklamacie@insportline.sk  
servis@insportline.sk

Web: www.inSPORTline.sk

Datum prodeje:

Razítko a podpis prodejce: